



## STILLE Diamond SuperCut

### Stevens STILLE Diamond SuperCut Tenotomy

101-8167-1-C	gebogen	12.5 cm 5"
101-8167-151-C	gebogen	15 cm 6"
101-8167-181-C	gebogen	18 cm 7"

### Stevens STILLE Diamond SuperCut Ergo Tenotomy

101-8167-2-C	gebogen	12.5 cm 5"
--------------	---------	------------

### Metzenbaum STILLE Diamond SuperCut

101-8175-15-C	gebogen	15 cm 6"
101-8175-18-C	gebogen	18 cm 7"

### Baby Metzenbaum STILLE Diamond SuperCut

101-8163-C	gebogen	12.5 cm 5"
------------	---------	------------

### Metzenbaum STILLE Delicate Diamond SuperCut

101-8173-15-C	gebogen	15 cm 6"
101-8173-18-C	gebogen	18 cm 7"

### Ragnell STILLE Diamond SuperCut

101-8380-121-C	gebogen	12.5 cm 5"
101-8380-151-C	gebogen	15 cm 6"
101-8380-181-C	gebogen	18 cm 7"



## STILLE – Chirurgie in Perfektion

STILLE ist weltweit einer der ältesten Hersteller von Medizintechnik. Wir entwickeln und produzieren patentrechtlich geschützte, qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und Spezialtische und verkaufen sie an führende Chirurgen auf der ganzen Welt. Und das seit über 170 Jahren.

Die chirurgischen Instrumente von STILLE gelten bei vielen Chirurgen weltweit als absolute Spitzentechnologie. Alle STILLE-Instrumente werden von fachkundigen Medizintechnikern in vollendeter Handwerkskunst im schwedischen Eskilstuna gefertigt.

Unsere Instrumente erkennt man an ihrem schlanken Design und ihrer ausgezeichneten Balance. Aufgrund ihrer Oberfläche und ihrer filigranen Konstruktion wiegen STILLE-Instrumente weniger und sind einfacher zu reinigen. Somit sind sie beständiger gegen Verfärbung und Korrosion.

All diese Vorteile verleihen unseren Instrumenten eine einzigartige, herausragende Haptik.



Surgical perfection. For life.

STILLE AB  
Ekbacken 11  
SE-644 30 Torshälla, Sweden  
Phone: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

STILLE Surgical Inc.  
943 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
United States  
Phone: 1.800.6651614  
sales.us@stille.se

Distributed by:  
TapMed Medizintechnik  
Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen  
Telefon: 05606 53060-0  
info@tapmed.de

[www.stille.se](http://www.stille.se)



# STILLE Diamond SuperCut



## STILLE Diamond SuperCut

Einzigartig in Präzision,  
Langlebigkeit und Leistung



Surgical perfection. For life.



# STILLE Diamond SuperCut



Die Scheren der Serie Diamond SuperCut definieren die Fertigungsstandards neu und setzen bei der Leistung einzigartige Maßstäbe. Das Entwicklungsteam von STILLE hat zusammen mit Experten der Materialtechnik eine diamantähnliche Beschichtung von besonderer Härte entwickelt.

Die sogenannte Diamond-Beschichtung macht die Scheren langlebiger und korrosionsbeständiger und damit rentabel und umweltfreundlich.

## Besonders langlebig


Die Beschichtung der STILLE Diamond SuperCut ist mit einer Vickershärte bzw. einem HV-Wert von 3000 bis zu 50 % härter als eine Tungsten-Carbid- oder Keramikbeschichtung, die üblicherweise einen HV-Wert von 1700-2400 haben.

Je härter die Schicht, desto langlebiger die Schere und desto seltener muss sie geschliffen werden.

## Selbstschmierend und einfach zu sterilisieren

Die neue Diamond-Beschichtung weist eine geringere Reibung auf und ist selbstschmierend. Dadurch erhöht sich die Langlebigkeit der Klinge zusätzlich, was eine Investition noch rentabler macht.

Nach Gebrauch und Sterilisation muss das Gelenk weniger geschmiert werden. Die Diamond SuperCut ist für die üblichen Wasserstoffperoxidsysteme wie die Oxivario-Desinfektion und die Sterrad-Sterilisation validiert.

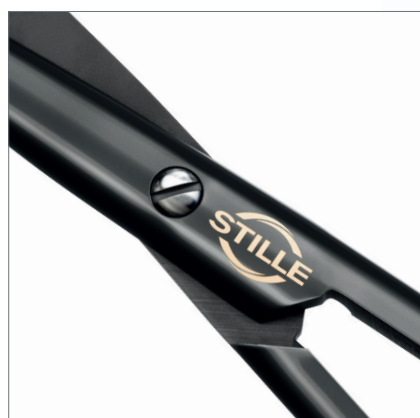

Handgemachte Perfektion aus Schweden für höchste Schneidpräzision in einzigartiger Haptik und besonderer Langlebigkeit

## Geringere Reflexion

Die extrem harte und kaum reflektierende Diamond-Beschichtung spiegelt das Licht der OP-Leuchten kaum. In Studien wurde nachgewiesen, dass die Reflexion der metallischen Oberfläche um 70 % reduziert ist. Im starken OP-Licht, das den Kontrast zwischen Instrumenten und Gewebe verstärkt, ermüden die Augen dadurch weniger schnell.

## Umweltfreundliche Produktion

Die Beschichtung der Diamond SuperCut ist chromfrei und somit ist das Herstellungsverfahren umweltfreundlich und nachhaltig.

## Perfektion bei jedem Schnitt

STILLE-Scheren werden aus handgeschmiedeten runden Stahlstäben gefertigt. Das Zusammenspiel einer rasiermesserscharfen Klinge mit einer mikrofein gezahnten unteren Klinge erlaubt Schnitte von höchster Präzision, da das Gewebe bei jedem Schnitt gehalten wird, so dass die Schere nicht abrutschen kann.

## 30 Jahre Garantie

Auf alle STILLE Instrumente erhalten Sie 30 Jahre Garantie - für die Dauer Ihrer chirurgischen Laufbahn. Auf unsere zuverlässige Dienstleistung und intensive Kundenbetreuung können Sie sich verlassen.

